

The Sharp Carboxytherapy



CARBOXY-PEN®
CARBOXYTHERAPY



Safe - Small - Fast - Accurate



UNIVERSAL

The Carboxy-Pen accepts all types of needles as well for length & diameters

DEFINITION : La Carboxytherapie est l'utilisation thérapeutique de CO₂ à l'état gazeux administré en sous-cutané.

ACTIONS THERAPEUTIQUES :

- Activation de la vasodilatation microcirculatoire
- Augmentation de la microcirculation
- Augmentation de l'action lipolytique des tissus adipeux
- Augmentation du niveau d'oxygène dans les tissus superficiels

INDICATIONS :

MEDECINE ESTHETIQUE :

- Cellulite
- Co-adjuvant dans les traitements adipeux localisés
- Pré et post opératoire dans les greffes de peau

CHIRURGIE PLASTIQUE :

- Pré et post liposculpture

ANGIOLOGIE :

- Arthériopathies périphériques organiques ou fonctionnelles

RHUMATOLOGIE :

- Arthrite auto-immune
- Ostéo-arthrose dégénérative
- Arthrites aiguës (Epicondylites, périarthrites)

UROLOGIE :

- Disfonctionnements érectiles

DERMATOLOGIE :

- Psoriasis
- Ulcères

DEFINITION : Carboxytherapy is the therapeutical use of CO₂ in a gaseous state administered subcutaneously

THERAPEUTIC ACTIONS :

- Active microcirculatory vasodilatation
- Increase the microcirculatory speed and movement
- Increase the lipolytic actions of the adipose tissue

INDICATIONS :

COSMETIC MEDICINE:

- Edematous Fibrosclerotic Panniculopathy (EFP). Cellulitis
- Coadjuvant in localized adiposity treatment
- Pre and postoperative in skin grafts

COSMETIC SURGERY:

- Pre and post liposculpture

ANGIOLOGY :

- Organic or functional peripheral arteriopathies

RHEUMATOLOGY :

- Autoimmune arthritis
- Degenerative osteoarthritis
- Acute arthritides (Epicondylitis, periartitis)

UROLOGY:

- Erectile dysfunction, associated to microangiopathies

DERMATOLOGY:


- Psoriasis
- Ulcers associated to microangiopathies (varicose, diabetic)

PAINLESS and GOOD VALUE

Injection begins with a simple pressure of the Pen on the treated area and can be smooth or fast.

Electronical and progressive control of the flow of gas injection

Size reference

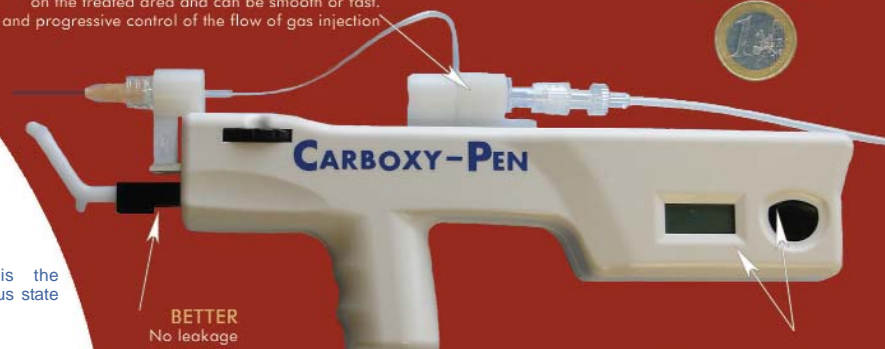

BETTER
No leakage

HANDY
Designed for both left & right handed

PRACTICAL and MODERN
A digital screen indicates all treatment variables and a single multi-directional button controls the settings



Always one step ahead for the best MEDICAL-SYSTEMS...

CARBOXY-PEN®

CARBOXYTHERAPY

CARACTERISTIQUES GENERALES :


Poids de l'appareil : 180 grammes
 Longueur : 18 cm
 Alimentation : 100 / 240 Volts - 50 / 60 Hz
 Connection CO2 : standard type C
 Garantie : 2 ans
 Appareil conçu pour une utilisation ambidextre
 Conçu et fabriqué sous Certification ISO 9001
 ISO 13485 - EN 46001

GENERAL FEATURES:

Weight : 180 g
 Length : 18 cm
 Power : 100 / 240 Volts - 50-60 Hz
 Connexion CO2 : standard type C
 Warranty : 2 years
 Designed for both left and right handed
 Designed and made under ISO 9001
 ISO 13485 - EN 46001

- UNIVERSEL : Accepte toutes les aiguilles standards. PAS DE KIT EXCLUSIF
- RAPIDE : Mise en oeuvre du traitement en 2 minutes
- DOSIMETRIQUE : Dose de CO2 réglable
- COMPLET : Profondeur d'injection réglable de 1 à 16 mm
- MODERNE : Un écran graphique indique tous les paramètres de traitement et une seule touche multi-directionnelle permet d'accéder à tous les réglages.
- PRATIQUE : Une vibration dans la paume de l'utilisateur indique le temps de délivrance de la dose.
- INDOLORE : L'injection est déclenchée par simple pression de l'appareil sur la zone à traiter. Le mouvement d'injection, très pur, peut être lent ou rapide selon les besoins. Gestion électronique et progressive de la vitesse de délivrance du gaz.
- SECURITE : L'injection n'est déclenchée que lorsque l'aiguille a atteint la profondeur programmée. Stérilité garantie sur l'ensemble du dispositif
- AUTONOMIE : Double alimentation de série : secteur et batterie Lithium (autonomie : 5 heures)

- UNIVERSAL : Accept any standard needles, NO EXCLUSIVE KIT
- FASTER : Easy settings - Ready in 2 minutes
- DOSIMETRIC : Dose of CO2 gas adjustable
- DEEPER : Depth of injection adjustable from 1 to 16 mm
- MODERN : A digital screen indicates all treatment variables and a single multi-directional button controls all the settings.
- PRACTICAL : A little vibration in the hand confirms the right delivery of the dose.
- PAINLESS : Injection begins with a simple pressure of the CarboxyPen on the treated area. The movement of the injection, very safe and pure, can be smooth or fast according to the treatment. Electronical and progressive control of the flow of gas injection.
- SAFE : Injection starts only when the needle reaches the correct depth. Sterile environment warranted on the whole device
- AUTONOMY : Double energy : Main power and Lithium battery (autonomy : 5 hours)

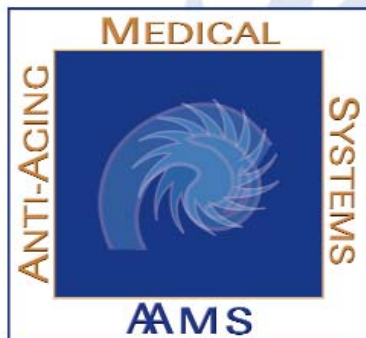

"The CarboxyPen is delivered in a light handle case."

Family Name First Name

Institution & Specialty

Address

Zip code..... CityCountry

Tel. Fax E-mail

- I am interested in the **Carboxy-Pen**, please **send me more information**.
- I am interested in **Anti-Aging Medical Systems** products, please **send me more information**.

European Office

AA Medical-System Ltd
 EPPS Building Bridge Road - Ashford Kent
 TN23 1BB - United Kingdom
 Tel +44 (0)1 233 366 370
 Fax +44 (0)1 233 366 380

Factory

Pôle Technologique de Vimenet
 48100 MONTRODAT - France
 Tel +33 (0)4 66 32 31 16
 Fax +33 (0)4 66 32 45 03

contact@aa-medicalsystems.com

www.aa-medicalsystems.com

Official Distributor: